

建豐健康科技

FongAI 建豐鑑測 APP操作流程



字體大小 ▾ 繁體中文 ▾

 **建豐健康科技**
FongAI Co., Ltd.
FongAI 建豐鑑測

帳號

fongai

密碼



☒ 記住帳號

登入

APP 版本: 1.1.0



建豐健康科技
FongAI Co., Ltd.

目 錄

1 簡易身體功能量表 →

2 FongAI建豐鑑測下載流程 →

3 FongAI建豐鑑測操作流程 →

4 資料上傳 →

5 其他注意事項 →

SPPB

簡易身體功能量表

1. 平衡測驗：腳用三種不同站法，每種站立10秒。使用三個位置的分數總和。

A. 並排站立
(Side-by-side stand)



☐ 1分：保持10秒
☐ 0分：少於10秒

B. 半並排站立
(Semi-tandem stand)



☐ 1分：保持10秒
☐ 0分：少於10秒

C. 直線站立
(Tandem stand)



☐ 2分：保持10秒
☐ 1分：保持3-9.99秒
☐ 0分：保持<3秒

平衡測試得分小計：_____

2. 步行速度測驗：測量走四公尺的時間



☐ 4分：<4.82秒
☐ 3分：4.82–6.20秒
☐ 2分：6.21–8.70秒
☐ 1分：> 8.70秒
☐ 0分：無法完成

3. 椅子起站測驗：連續起立下五次的時間



☐ 4分：<11.19秒
☐ 3分：11.2–13.69秒
☐ 2分：13.7–16.69秒
☐ 1分：16.7–59.99秒
☐ 0分：> 60秒或無法完成

總分

/ 12分

FongAI建豐鑑測下載流程

請先依照下方流程搜尋或掃描QRcode進行下載。

以下為APP下載SOP：

- 1.請掃描QRcode或打開APP Store，在其中搜尋FongAI或建豐鑑測
(建議裝置：需要 iOS 15.2或以上版本)

SCAN ME!



搜尋：fongai | 建豐鑑測



- 2.下載『FongAI建豐鑑測』APP




鑑測說明

FongAI動態骨架防跌鑑測須由2人合作完成檢測，
一人為受測者、一人擔任操作人員。

測驗內容為簡易身體功能量表（SPPB），
依序分別會量測受測者

椅子起站測試→平衡測試→步行速度測試

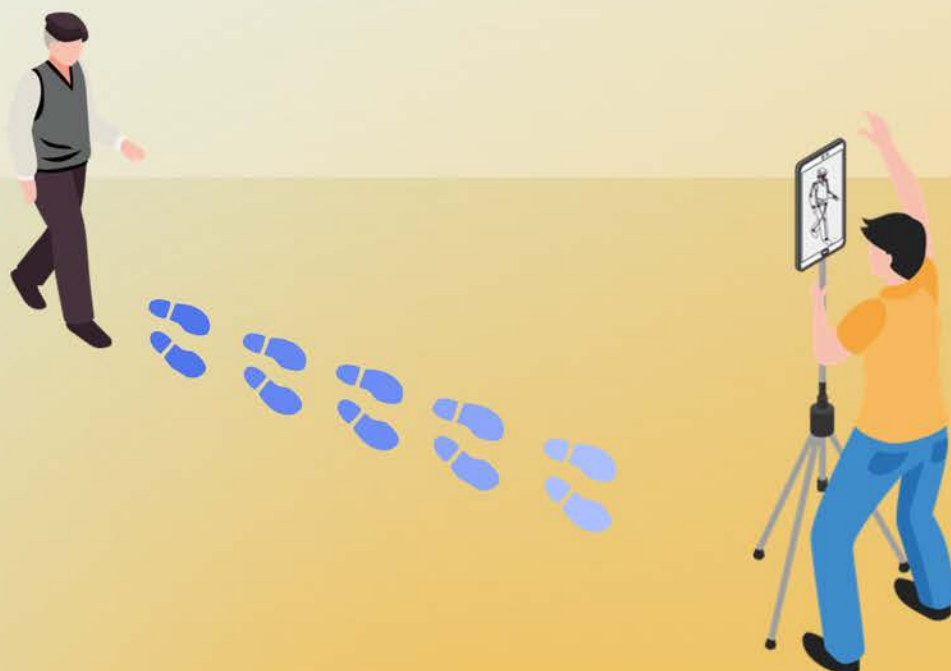

01.

準備物品

1. iPhone或iPad一台
2. 一隻輕便三腳架
3. 一張穩固的椅子



02.

前置作業


1. iPhone、iPad垂直置於三腳架上，固定好位置後，勿移動腳架位置
2. 椅子穩定放置
3. 將手機與椅子呈現一直線
4. 鏡頭與地面高度約**95-97公分**
5. 調整**垂直3度內，水平 ± 0.03 內**
6. 請打開手機的聲音，鑑測開始後會有語音提示。



03.

鏡頭校準

1. 打開Fongai建豐鑑測APP，使用帳號密碼登入
2. 首次點開鑑測會提示需執行校準，或是從首頁點擊「**鏡頭校準**」按鈕
3. 進入畫面後，請輸入**操作者之身高**
4. 輸入完成後，**面向鏡頭慢慢往後退**
5. 機器會自行判斷空間距離，至4公尺時，會聽到【**校準完成**】，即完成校準作業。

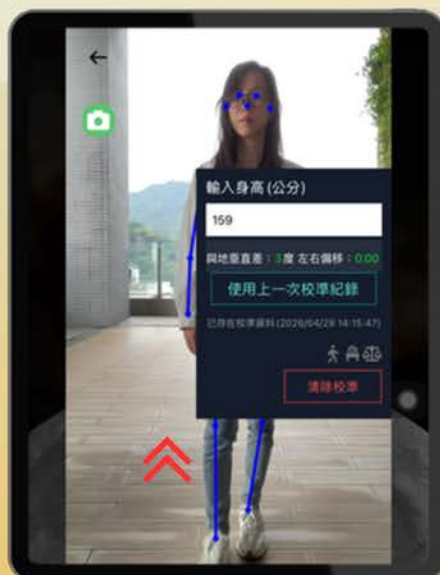

04.

受測者管理

1. 在APP首頁處，點擊「受測者管理」
2. 進入畫面後，選擇要建置名單的資料夾/班級/單位
3. 輸入該受測者之，姓名、性別、出生年月日
4. 輸入完成後，按下註冊


*若需大量建置名單，請洽詢建豐工作人員



05.

開始鑑測


1. 在APP首頁處，點擊「開始鑑測」
2. 進入畫面後，選擇「鑑測據點」
3. 滑動可選擇將進行檢測之受測者，或透過右上角的放大鏡，進行名單搜尋
4. 點選右邊箭頭即可開始進行鑑測

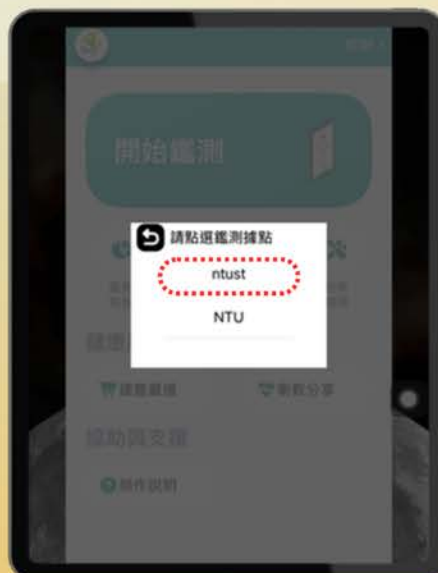

06.

椅子起站測驗

1. 首先進行**起坐測驗**，受測者坐在穩定的椅子上，並將**踝關節**放置於綠色框內
2. 請受測者坐到指定位置後，按下**右方解鎖鈕**
3. 此時請受測者雙手交叉抱胸，進行連續**五下起坐**

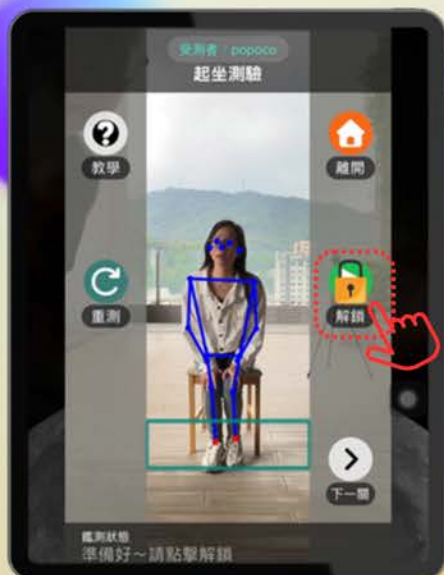

07.

平衡測驗

1. 接著進行平衡測驗，請受測者緩緩起身，在原先起站時的位置，此時需將後方椅子移開

*注意提醒受測者切勿再往後坐下

2. 雙腳踝關節的節點，對到綠色框內

3. 平衡測試分成三項：**雙腳併攏站立**、**雙腳半前站立**、**雙腳一直線站立**

雙腳併攏站立10秒



雙腳半前站立10秒



雙腳一直線站立10秒





08.

步行速度測驗

1. 最後進行**步速測驗**，請受測者後退至**橘色區域**，面向手機/平板
2. 當到達定點，按下右方解鎖鈕，請受測者從最遠處，走向手機/平板，當踝關節走超出綠框之後轉身，走回起始點。
3. 完成後，即完成所有測驗。

***注意！** 請受測者依照平時走路速度進行檢測

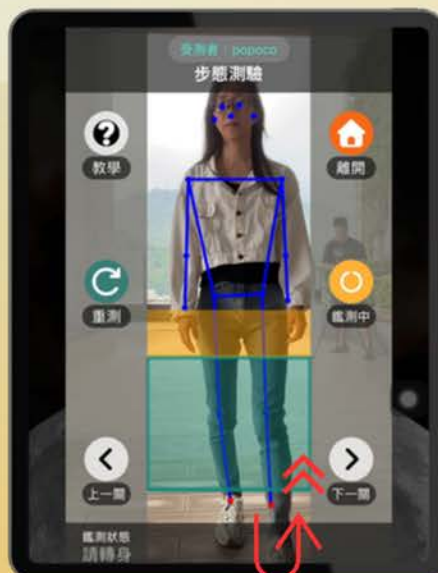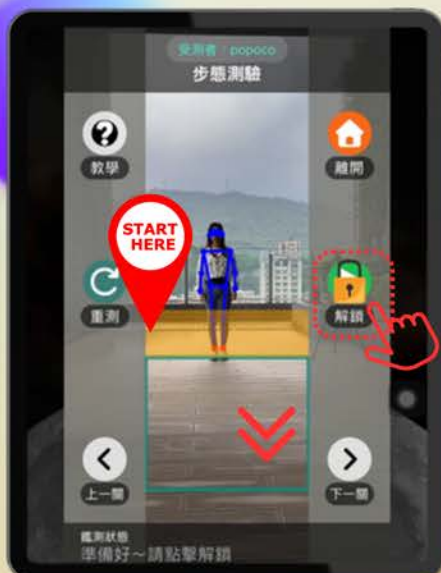

資料上傳

結束鑑測後，需將暫存於手機/平板內的影片資料檔進行上傳，以便產出儀表板資料。

資料上傳方式說明如下：

- 1.回到首頁，點選「影像上傳」
- 2.選擇要上傳影像日期
- 3.選擇要上傳影像之鑑測據點，按下開始上傳



其他注意事項

1. 按鍵說明

重新測驗：

長者動作錯誤或沒準備好？
點擊此按鈕重新來過

回上一關：

覺得上一關沒做好？可以
退回上一個測驗項目

離開鑑測：

中斷測驗，返回主頁面

解鎖按鈕：

每關開始前，請先跟長者
說明動作，確認沒問題後
再按解鎖開始。

略過按鈕：

若長者身體狀況無法完
成該關卡，可點擊略過



2. 手動開始



手動開始：

寬褲、裙子或同色鞋褲有
可能會無法準確偵測到腳
踝節點，導致平衡會有無
法自動判別正確動作的問
題，此時若長者的動作正
確，可使用手動開始，讓
系統開始讀秒並進行檢測

***請注意！只有在平衡測驗才能使用手動開始的功能！**

📞 需要協助嗎？

若的操作過程中遇到任何系統異常、帳號問題或流程疑問，歡迎隨時與我們聯繫，我們將有專人為您協助：

客服信箱： service@fongai.co

官方網站： <https://fongai.co>

⚠️【安全提醒】 > 進行FongAI鑑測時，請務必以「**受測長者的安全**」為最高指導原則。若長者在測試過程中感到不適或體力不支，請立即停止測驗，切勿勉強。

文件發行資訊

發行單位：建豐健康科技股份有限公司 (FongAI Co., Ltd.)

文件語系：繁體中文 (zh-TW)

文件版本：V 1.1.6_TW

更新日期：2026.05.28

