

建豊健康科技

FongAI 建豊測定 アプリ操作手順



文字大小 ▼ 日本語 ▼

 **建豊健康科技**
FongAI Co., Ltd.

FongAI 建豊測定

アカウント

fongai

パスワード



☒ アカウントを保存

ログイン



建豊健康科技
FongAI Co., Ltd.

目次

- 1 簡易身体機能評価 →
- 2 FongAI 建豊測定 ダウンロード手順 →
- 3 FongAI 建豊測定 操作手順 →
- 4 データアップロード →
- 5 その他注意事項 →

SPPB

簡易身体機能評価

1. バランステスト：3種類の異なる立ち方で、それぞれ10秒間保持します。
3つのポジションの合計点を使用します。

A. 閉足立位
(Side-by-side stand)



- 1点：10秒間保持
- 0点：10秒未満

B. セミタンデム立位
(Semi-tandem stand)



- 1点：10秒間保持
- 0点：10秒未満

C. タンデム立位
(Tandem stand)



- 2点：10秒間保持
- 1点：3～9.99秒間保持
- 0点：3秒未満

バランステスト小計： _____

2. 歩行速度テスト：4メートルを歩行する
時間を測定します。



- 4点：<4.82秒
- 3点：4.82～6.20秒
- 2点：6.21～8.70秒
- 1点：> 8.70秒
- 0点：完了不可

3. 椅子立ち上がりテスト：連続して5回
立ち座りを行う時間を測定します。



- 4点：<11.19秒
- 3点：11.2～13.69秒
- 2点：13.7～16.69秒
- 1点：16.7～59.99秒
- 0点：>60秒または完了不可

合計点

/ 12点

FongAI 建豐測定 ダウンロード手順

以下の手順に従って検索、またはQRコードをスキャンしてダウンロードしてください。

アプリダウンロードのSOPは以下の通りです：

QRコードをスキャンするか、App Storeを開き、その中で「FongAI」または「建豐測定」を検索します。

(推奨デバイス：iOS 15.2以降のバージョンが必要です)

SCAN
ME!



搜尋：fongai | 建豐鑑測

2. 「FongAI 建豐測定」アプリをダウンロードします。



測定の説明

FongAI 動的骨格転倒予防測定は、2人1組で実施する必要があります。1人は被測定者、もう1人はオペレーター（測定者）を担当します。

テスト内容は**簡易身体機能評価（SPPB）**です。

以下の順序で被測定者の測定を行います：


椅子立ち上がりテスト → バランステスト → 歩行速度テスト



01.

準備する物

- 1.iPhone または iPad 1台
- 2.軽量の三脚 1台
- 3.安定した椅子 1脚

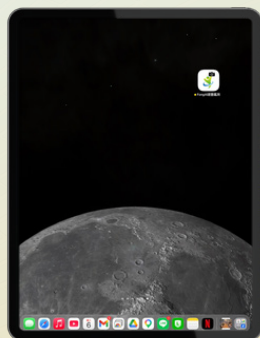

02.

事前準備

1. iPhoneやiPadを三脚に垂直に設置し、位置を固定した後、三脚を動かさないでください。
2. 椅子を安定した場所に置きます。
3. スマートフォンと椅子が一直線になるように配置します。
4. カメラレンズの高さは地面から約**95～97センチメートル**に設定します。
5. **垂直は3度以内、水平は ± 0.03 以内**に調整します。
6. スマートフォンの音量をオンにしてください。測定開始後に音声ガイダンスが流れます。



03.

カメラのキャリブレーション （位置合わせ）

1. FongAI建豊測定アプリを開き、アカウントとパスワードを使用してログインします。
2. 初回測定時はキャリブレーションの実行が求められます。またはホーム画面の「カメラ校正」ボタンをタップします。
3. 画面に入ったら、オペレーター（測定者）の身長を入力します。
4. 入力完了後、カメラを向いたままゆっくりと後ろに下がります。
5. 機器が自動的に空間距離を判断し、4メートルに達すると
【校正完了】という音声で鳴り、キャリブレーション作業が完了します。



04.

被測定者管理

1. アプリのホーム画面で、**被測定者管理**をタップします。
- 2.画面に入った後、リストを作成するフォルダ／クラス／単位（所属）を選択します。
- 3.該当する被測定者の**氏名、性別、生年月日**を入力します。
- 4.入力完了後、「登録」をタップします。

*名簿を大量に作成する必要がある場合は、建豊のスタッフにお問い合わせください。



05.

測定開始


1. アプリのホーム画面で、「測定開始」をタップします。
2. 画面に入った後、「測定拠点」を選択します。
3. スワイプして測定を行う被測定者を選択するか、右上の虫眼鏡アイコンから名簿検索を行います。
4. 右側の矢印をタップすると、測定が開始されます。



06.

椅子立ち上がりテスト

1. まず立ち座りテストを行います。被測定者は安定した椅子に座り、足首の関節を緑色の枠内に配置します。
2. 被測定者が指定の位置に座った後、右側のロック解除ボタンをタップします。
3. その後、被測定者は両手を胸の前で交差させ、連続して5回立ち座りを行います。

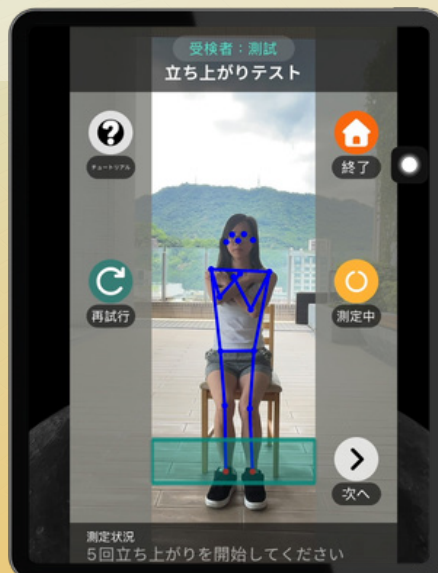

07.

バランステスト

1. 続いてバランステストを行います。被測定者にゆっくりと立ち上がってもらい、先ほどの立ち上がり位置に立ちます。この時、後ろの椅子は移動させてください。

***注意：被測定者が誤って後ろに座らないよう、必ず注意喚起してください。**

2. 両足首の関節ノードを緑色の枠内に合わせます。

3. バランステストは3つの項目に分かれています：

閉足立位、セミタンデム立位、タンデム立位。

閉足立位 10秒



セミタンデム立位 10秒



タンデム立位 10秒



08.

歩行速度テスト

- 1.最後に歩行速度テストを行います。被測定者はオレンジ色のエリアまで下がり、スマートフォン／タブレットの方向を向きます。
- 2.定位置に到達したら、右側のロック解除ボタンをタップします。被測定者に最も遠い位置からスマートフォン／タブレットに向かって歩いてもらい、足首が緑色の枠を超えたら振り返り、元の開始地点まで戻ってもらいます。
- 3.完了すると、すべての測定が終了となります。

***注意！ 被測定者には、普段の歩く速度でテストを行うように伝えてください。**



データアップロード

測定終了後、ダッシュボードデータを生成するために、スマートフォン／タブレット内に一時保存された動画データファイルをアップロードする必要があります。

データアップロードの方法は以下の通りです：

- 1.ホーム画面に戻り、「画像アップロード」をタップします。
- 2.アップロードする画像の日付を選択します。
- 3.アップロードする画像の測定拠点を選択し、「アップロード開始」をタップします。



ボタンの説明

1. ボタンの説明

再測定

動作の間違いや準備不足の際、タップしてやり直します。

前の画面に戻る

前のテストをやり直したい場合、1つ前の項目に戻れます。

測定終了

テストを中断し、メイン画面に戻ります。

ロック解除ボタン

動作を説明し、準備ができればロックを解除して開始します。

スキップボタン

体調等の理由で完了できない場合、このボタンでスキップします。

2. 手動開始

手動開始:

服装（ワイドパンツや同色の靴など）により足首が検出できず、自動判定されない場合があります。動作自体が正しい場合は、「手動開始」を押してシステムにカウントダウンを実行させます。

***ご注意！ 手動開始機能はバランステストでのみ使用可能です！**

お困りですか？

操作中にシステム異常、アカウントの問題、または手順に関する疑問が発生した場合は、いつでもお気軽にお問い合わせください。専門スタッフがサポートいたします：

カスタマーサポートメール: service@fongai.co

公式ウェブサイト: <https://fongai.co>

 **【安全に関するご注意】** FongAI測定を実施する際は、必ず「**測定を受ける高齢者の安全**」を最優先の原則としてください。テスト中に高齢者が不調を感じたり、体力が続かない場合は、直ちにテストを中止し、絶対に無理をさせないでください。

ドキュメント発行情報

発行元： 建豊健康テクノロジー株式会社 (FongAI Co., Ltd.)

ドキュメント言語： 日本語 (JPN)

ドキュメントバージョン： V 1.1.6_JPN

更新日： 2026.06.01

